

— Evolve your skin now —

GSD®




Coolite Evo

- **Rápida Depilación**
- **Rejuvenecimiento Facial**



Coolite Evo, desarrollado a partir de Coolite Pro, es la nueva generación de láser de diodo acoplado por fibra. Con una vida útil más prolongada y el nuevo sistema de rejuvenecimiento de la piel, Coolite Evo genera un mayor retorno de la inversión, además de los tratamientos de depilación. Los pacientes experimentarán tratamientos mucho más rápidos y más cómodos, gracias a la potencia láser mejorada y mayor tamaño de punto. Evolucione su negocio proporcionando más que tratamientos de depilación láser y beneficie de un rápido retorno de la inversión.

Coolite Evo

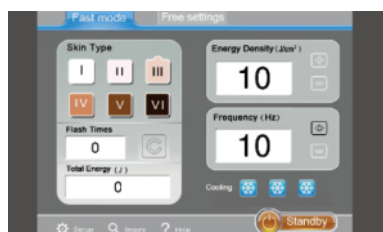

**Amigable
software
intuitivo y
preprogramado**

¿Qué es la tecnología de láser de diodo acoplado por fibra?

La tecnología de diodo acoplado (FCD) utiliza un conjunto de micro lentes en la unidad que concentran la energía láser y generan la transmisión vía fibra óptica hacia el objetivo sin pérdidas.

Este diseño innovador asegura una distribución de energía uniforme, baja tasa de daño, larga vida útil y fácil mantenimiento del diodo láser.

100 millones de disparos de vida útil, 1 año de garantía.

Coolite Evo presenta una duración de vida súper larga, que duplica la de Coolite Pro, extendiéndose a 100 millones de disparos. Este es un avance en la historia del láser de diodo acoplado con fibra. Se proporciona garantía de 1 año, sin ninguna limitación de pulsos.

Nuevo software para el rejuvenecimiento de la piel.

Coolite Evo es la primera versión de la familia Coolite con un software adicional de rejuvenecimiento de la piel, que mejora en gran medida el retorno de la inversión. De 3 a 6 tratamientos van a lograr una piel más tersa, con brillo, reducción de poros abiertos, y mejor tensión mediante la regeneración del colágeno.

Mayor Spot, mejor potencia

La potencia del láser se incrementa en un 20%, hasta 750 W, lo que brinda una experiencia de tratamiento más cómoda para los pacientes. El punto del tamaño aumenta a 10x15mm, lo que reduce significativamente el tiempo de tratamiento.

Pieza de mano más ligera, reducida a 185 g.

La nueva pieza de mano más ligera es reducida en un 35%, en comparación con la de Coolite Pro, que solo pesa 185 g, con esta pieza de mano fácil de usar, los operadores pueden disfrutar de una experiencia de trabajo más agradable.

pieza de mano
más ligera
185g



Coolite Evo

— Evolve your skin now —

- **Rápida Depilación**
- **Rejuvenecimiento Facial**



■ Comparación de Láser de Diodo

Tipo de láser	Diodo Convencional	Diodo Acoplado (FCD)
Uniformidad del rayo láser	Gran ángulo de divergencia	Pequeño ángulo de divergencia
Posibilidad de daño térmico	Alto	Bajo
Temperatura del agua de enfriamiento	<30°C	<45 °C
Posibilidad de condensación	Extremadamente alto	No
Requisito de mantenimiento	Reemplace el filtro cada 6 meses	Reemplace el filtro cada 1 año.
Tiempo de vida	20 millones de disparos	100 millones de disparos
Garantía pulsos	Pulsos limitados	Pulsos ilimitados.

■ Especificaciones Técnicas

Tipo de láser	810nm Fibra Diodo Láser
Poder del láser	750W
Tamaño del Spot	15*10mm
Densidad de Energía	1-100J/cm2
Ancho de Pulso	7-600ms
Frecuencia	1--10Hz
Cooling	<5°C Sapphire touch cooling
Dimensiones	500*380*350mm
Peso Neto	22Kg



Distribuidor Exclusivo

Profimédica



@profimédica



(0412) 287.0477

www.profimedicaave.com

Ventajas



Touch Cooling



Láser de Alto Poder



Super durable



Pieza de Mano Liviana



Rejuvenecimiento de Piel