

VagiLaser

Vaginal Laser Treatment

Lleve su Práctica A OTRO NIVEL

Ofrezca un tratamiento ambulatorio, no invasivo y no hormonal para mejorar la salud vaginal, restaurando la confianza y el bienestar del paciente.

VagiLaser lo posiciona a la vanguardia de la tecnología de la salud de la mujer, al tiempo que amplía su oferta de práctica.

VagiLaser es un láser compacto de alto rendimiento que ofrece un amplio abanico de tratamientos mediante distintos tipos de emisiones de energía y una variedad de puntas disponibles.



Rápido

El procedimiento toma solo minutos.



Preciso

Full control de la ablación, corte y coagulación



Efectivo

Resultados notables desde la primera sesión



Simple

Sin anestesia ni post procedimientos para cuidados son requeridos




- 1 Retracción del canal vaginal
- 2 Incontinencia urinaria
- 3 Atrofia vaginal menopáusica
- 4 Rejuvenecimiento genitales externos

Retracción en menor tiempo

Su completo set de 45 o 360 grados emite láser fraccionado con cobertura tridimensional. Esto produce 50-70C° grados en una profundidad controlada de la mucosa vaginal, estimulando la lámina propia y miometrio fibroblastos nacientes, y fibras de colágeno dañadas, como su reestructuración, para lograr el engrosamiento de la pared vaginal y el endurecimiento de la vagina para la firmeza, la mejora de la sensibilidad, y el estrechamiento vaginal.

Satisfacción %

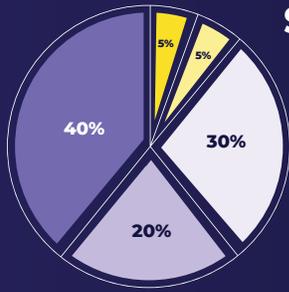

- Muy insatisfecho
- insatisfecho
- De alguna manera satisfecho
- Satisfecho
- Muy Satisfecho

A través del tiempo **VagiLaser** ha demostrado ser una solución altamente efectiva para los tratamientos indicados dándole un alto valor a la práctica clínica y generando un impacto positivo en la comunidad de pacientes.

Avanzado Interface

Su pantalla touch de gran tamaño provee un amigable y rápido acceso a las diferentes funciones y una extensa posibilidad de configurar los tratamientos. Incluyendo 5 programas favoritos pregrabados por el usuario.



Diseño Láser a la medida

Los tratamientos externos contemplados a nivel de genitales o inclusive a nivel dermatológico como los faciales, pueden adaptarse según el área por medio de distintos patrones disponibles en la función Fraccional.




Set completo multidisciplinario. Una amplia gama de tratamientos

Puntas de rápido intercambio para una emisión láser expandida de 360 grados o concentrada de 90 grados.



Tres distanciadores proveen un mayor control del nivel de ablación: exfoliación profunda, micro exfoliación y sin exfoliación.

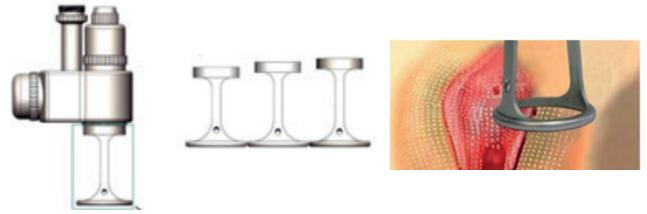

Puntas para incontinencia, rejuvenecimiento externo, blanqueamiento y otros procedimientos.



Pieza de corte y coagulación con 3 puntas distanciadoras para diversos focos de concentración y diámetro del láser.

Puede dibujar cualquier gráfico
Tamaño y densidad ajustables



Escáner de alta precisión
Los gráficos de escaneo son más precisos y rápidos

Salida de aire
Mejore la experiencia y la seguridad del tratamiento



Garantía completa de 2 años

Obtenga 2 años de total tranquilidad de respaldo local. Solucionaremos cualquier problema técnico sin cargo adicional o reemplazaremos el dispositivo si no podemos.

Longitud de onda láser	10,6µm ± 0,1µm
Potencia del láser	30W
Modo de salida	Modo matriz de puntos/modo pulso/ pulso largo y modo ultra pulso =/modo privado/modo vulvar
Longitud de onda de la luz indicadora	635nm
Tamaño del punto	≥ 0,7mm enfocado
Tensión de funcionamiento	AC 100-120V/AC200-240V , 50%60Hz
Tamaño de la pantalla	10,4 pantalla táctil a color de pulgadas
Medidas	69 x 46 x 40cm
Peso	30 Kg / 66 lbs